

Schneller Ausschluss von DOAK-bedingten Blutungsrisiken

DOAC Dipstick

Direkte orale
Antikoagulanzen



DOAK und ihre Diagnostik

Seit etwa 2008 werden direkte orale Antikoagulantien (DOAK) in Form von Apixaban (Eliquis®), Edoxaban (Lixiana®), Rivaroxaban (Xarelto®) und Dabigatran (Pradaxa®) als Behandlungsalternative zu etablierten Antikoagulantien wie z. B. Marcumar oder Warfarin verwendet. Sie können nach ihren Wirkmechanismen zwei verschiedenen Klassen zugeordnet werden: Faktor Xa-Inhibitoren (Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban) und Thrombin-Inhibitoren (Dabigatran). Im Jahr 2017 kamen in Deutschland mehr als 1 Milliarde Einzeldosen DOAK auf den Markt, Tendenz steigend.

Bei weiterführenden klinischen Fragestellungen ist ein Monitoring von DOAK nicht notwendig. Bei beispielsweise Blutungsmanagement oder Therapieentscheidungen bei thromboembolischen Ereignissen, ist das Testen auf DOAK jedoch erforderlich. Trotz steigender Verbreitung dieser Antikoagulantien ist der diagnostische Nachweis auf spezialisierte Labore beschränkt oder wird mittels patientennaher, globaler Gerinnungstests bestimmt, die in ihrer Aussagekraft allerdings deutliche Einschränkungen aufweisen.

Überblick DOAK-Diagnostik

Eventuell vorhandene DOAK Konzentrationen können mit unterschiedlichen Verfahren, je nach Anforderung des Anwenders, bestimmt werden.

Verfahren	Probenmaterial	Ort	Turnaround time (TAT)	Kosten	Anwendung
LC – MS /MS (Massenspektrometrie)	Serum, Plasma, Urin	Spezialisiertes Labor	Hoch	Hoch, nicht für Routinediagnostik geeignet	Goldstandard
Kalibrierte chromogene Anti-Xa-Teste	Plasma	Labor	Mittel	Vergleichsweise hoch	Spezialisierte Gerinnungsdiagnostik
PT(INR), aPTT, TT	Vollblut / Plasma	Labor, POCT	Gering	Vergleichsweise niedrig	Partiell geeignet (siehe Abb. 2)
DOAC Dipstick	Urin	POCT	Gering	Vergleichsweise niedrig	Qualitative Ausschlussdiagnostik

Abb. 1: Gegenüberstellung verschiedener Testverfahren zur DOAK-Diagnostik

Am Point-of-Care ist eine verlässliche Diagnostik mit etablierten Screeningtests nur eingeschränkt möglich. Während Dabigatran über die Thrombinzeit (TT) nachweisbar ist, können Faktor Xa-Inhibitoren weder über die Prothrombinzeit (PT) noch über die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) sicher ausgeschlossen werden. Detaillierte Informationen dazu finden sich in der Abbildung 2.

Gerinnungstests	Dabigatran	Apixaban	Rivaroxaban	Edoxaban	Kommentare
Screeningtests auf Gerinnung					
PT	-/↑	-/↑	↑/↑↑	-/↑	Ergebnisse sind abhängig von Reagenzien und individueller Variabilität.
aPTT	↑/↑↑	-/↑	-/↑	-/↑	Ergebnisse sind abhängig von Reagenzien und individueller Variabilität.
TT	↑↑↑	-	-	-	Sehr sensitiv für Dabigatran: keine Verlängerung der TT bedeutet Abwesenheit von Dabigatran im Plasma.

Abkürzungen: aPTT: aktivierte partielle Thromboplastinzeit; PT: Prothrombinzeit, TT: Thrombinzeit, ↑: signifikante Verlängerung; ↑↑: sehr signifikante Verlängerung; »-« keine Veränderung
Abb. 2: Auswirkungen von oralen Gerinnungshemmern auf die Resultate von Screeningtests zum Monitoring von DOAK-Aktivität (basierend auf Gosselin & Adcock); Übersetzt aus Pruszczyk et al. (2017). Thromb Haemost. 2018 Mar. 118(3) : 437-450.

DOAC Dipstick - Klarheit in nur 2 Schritten


Spezialisierte und qualitativ hochwertige DOAK-Diagnostik steht nicht überall oder in der gebotenen Zeit zur Verfügung. Der DOAC Dipstick stellt eine hervorragende Alternative dar und bietet Sicherheit in kürzester Zeit.

Schritt 1

Teststreifen in die Urinprobe eintauchen.

Schritt 2

Nach 10 Minuten die Ergebnisse ablesen.

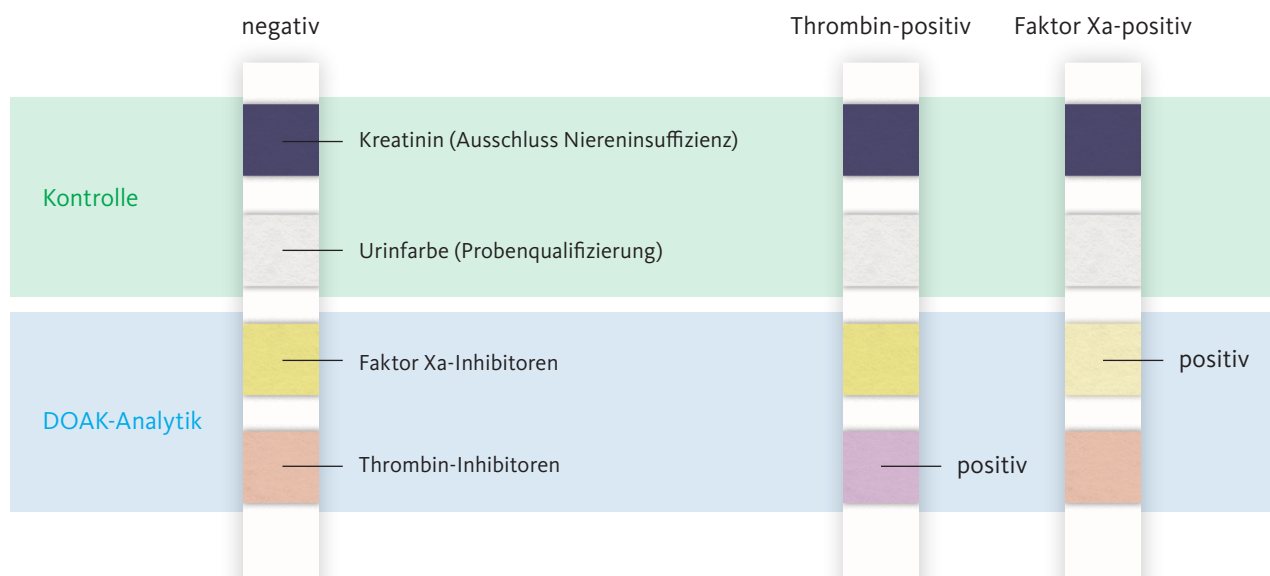

Warum direkte orale Antikoagulantien aus Urin testen?

Urin als Probenmaterial hat verschiedene Vorteile.

- DOAK werden über die Niere in den Urin ausgeschieden und akkumulieren dort
- Die ca. 7-fach höhere Konzentration von DOAK in Urin im Vergleich zu Blut bedingt eine höhere analytische Sensitivität
- Die Abwesenheit oder geringere Konzentration anderer zellulärer Bestandteile ermöglicht eine größere analytische Spezifität
- Ideal zur Ausschlussdiagnostik – Ausschlaggebend für die Ausschlussdiagnostik ist die zuverlässige Identifikation der oralen Antikoagulantien (hohe Sensitivität und Spezifität)



Vorteile des DOAC Dipstick

- Einfacher Ausschluss von Blutungsrisiken
- Schnelle Entscheidungshilfe bereits nach 10 Minuten
- Jederzeit und an jedem Ort verfügbare DOAK-Diagnostik
- Integriertes Kontrollfeld zur Erkennung ungeeigneter Patientenproben
- Plausibilitätsprüfung des Ergebnisses durch Nierenfunktionsparameter
- Sicherheit für behandelnden Arzt und Patienten

Spezifikationen

Parameter	DOAK – Faktor Xa-Inhibitoren: Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban DOAK – Thrombin-Inhibitor: Dabigatran Urinfarbe (Ausschluss ungeeigneten Probenmaterials) Kreatinin (Ausschluss Niereninsuffizienz)
Technologie	Teststreifen mit Farbumschlag nach Substratumsatz Qualitativ
Auswertung	Visuell
Probenmaterial	Urin (nativ oder Katheter)
Analysezeit	10 Minuten pro Teststreifen
Umfang	12 Teststreifen je Packung
Haltbarkeit	mindestens 6 Monate (ungeöffnet)
Lagerung	+ 2 °C bis + 30 °C, trocken
Artikelnummer	DO-301-0001

Weitere Informationen finden Sie unter www.doasense.de/resources.html

Vertrieb Deutschland: Sysmex Deutschland GmbH Bornbarch 1, 22848 Norderstedt · Telefon +49 (40) 534 10 2-0 · Fax +49 (40) 523 23 02 · info@sysmex.de · www.sysmex.de

Vertrieb Deutschland: Hitado GmbH Dreihausen 2, 59519 Möhnesee, Deutschland · Telefon +49 2924 9705-0 · Fax +49 2924 9705-31 · info@hitado.de · www.hitado.de

Vertrieb Österreich: Sysmex Austria GmbH Lienfeldergasse 31-33, 1160 Wien, Österreich · Telefon +43 1 4861631 · Fax +43 1 486163125 · office@sysmex.at · www.sysmex.at

Vertrieb Schweiz: Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Schweiz · Telefon +41 44 71838-38 · Fax +41 44 71838-39 · info@sysmex.ch · www.sysmex.ch

Hersteller: DOAENSE GmbH Waldhofer Str. 102, 69123 Heidelberg, Deutschland